


FCeM[®] FacileMix

培地や保存液にて希釈するだけで
”塑性流体”となり、即効果発揮！




- ・ 内容量 100 mL/bottle
- ・ PBS(+)ベースの組成物 (0.2%FP003B配合)
- ・ GMP準拠施設での製造品
- ・ 目的用途に応じた添加量の調整が容易
(例) 攪拌培養の凝集抑制 : 2.5 v/v% ~
凍結保存時の分注 : 5.0 v/v% ~

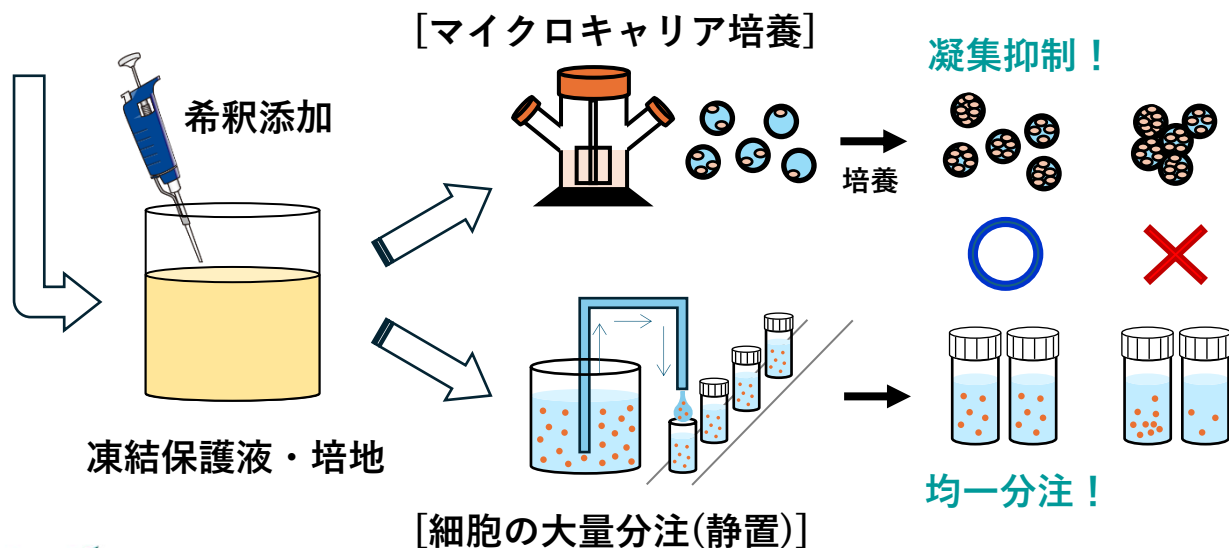


FCeM[®]

FacileMix

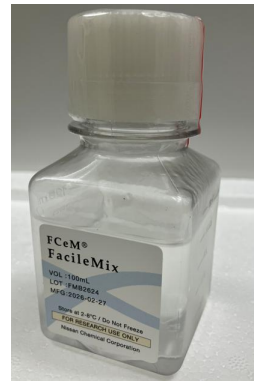


- ・ 培地/保存液に希釈調製後すぐに物性を発現し使用可能
- ・ FcEM[®]Advance-CR Preparation Kitと同等の性能を発揮

【例①】 マイクロキャリア培養時の凝集抑制効果

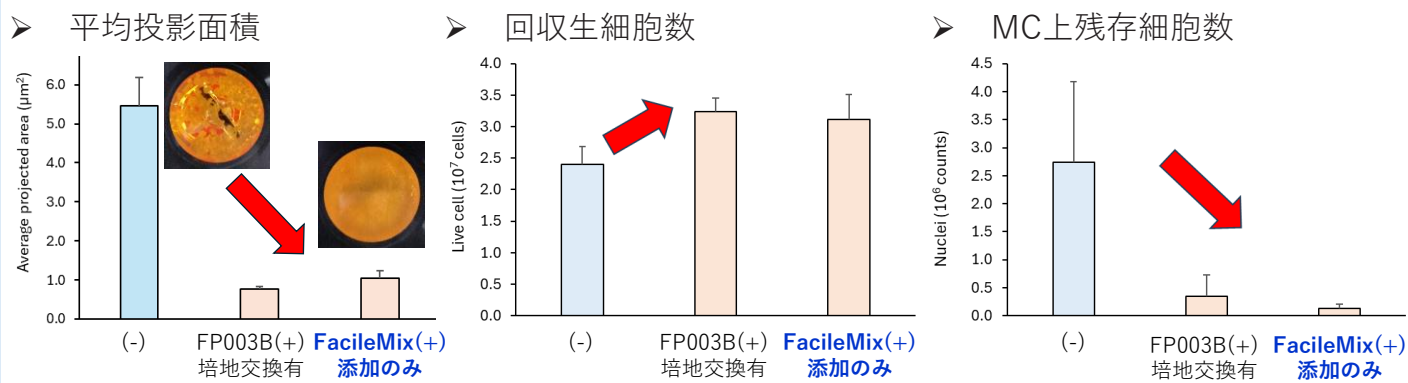

【例②】 細胞懸濁液の分注における均一化/品質安定化

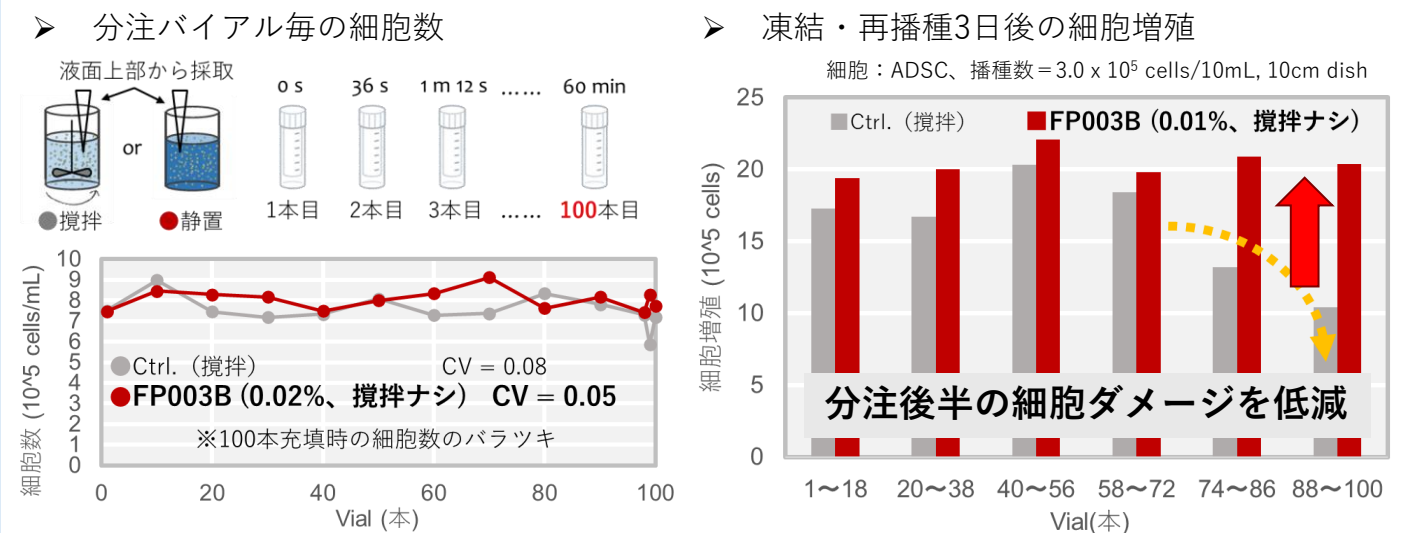

| 企画本部 ヘルスケア企画部

〒103-6119 東京都中央区日本橋2丁目5番1号 | Tel: 03-4463-8370 | Fax: 03-4463-8371
 詳細については右記までお問い合わせください e-mail: fcem@nissanchem.co.jp